

주의사항

본 제품을 올바르게 사용하기 위해 다음을 참조하시고, 다음 안전 지침을 준수하십시오.

- 이 제품은 방수가 되지 않습니다. 물에 담그지 마십시오.
욕조, 샤워 트레이, 세면대 또는 기타 물을 담은 용기와 가까운 곳에서 사용하지 마십시오.
제품과 전원 어댑터는 건조한 상태를 유지해 주세요.
- 제품을 사용하기 전에 물이나 다른 액체가 내부로 유입되는 것을 방지하기 위해 건조한 손으로 제품을 사용해 주세요. 피부 부위를 과도하게 흡착하면 얼굴이 빨개질 수 있습니다. 과도한 사용은 금해 주세요.
- 같은 부위에 3초 이상 사용하지 않도록 하고, 사용 시간은 5분을 초과 하지 마세요.
- 상처부위나 입, 눈, 혀 등 피부가 얇은 부위에는 사용하지 마십시오.
- 상처가 있는 피부 부위에는 제품을 사용하지 마십시오.
- 상처, 성형수술을 받은 부위, 피부의 염증, 가려움, 붉은 부분에는 사용하지 마십시오.
- 불편하시면 즉시 사용을 중단하십시오.
- 제품을 장시간 계속 사용 시 발열이 발생할 수 있으며, 이는 제품의 고장이 아니므로 안심하고 사용하시기 바랍니다.
- 제품 사용 후 피부가 붉어질 수 있으며, 이는 정상이며 1시간 이내에 사라집니다.
- 피부 문제에 노출되어 있는 경우, 제품을 사용하기 전에 의사와 상의하십시오.
- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 제품을 보관하고, 사고와 부상의 원인이 될 수 있으니 어린이가 사용하지 못하게 하십시오.
- 제품이 손상된 경우에는 사용하지 마십시오.

제품 구조

◎ 본체



작동 순서

◎ APP 다운로드 및 설치

사용 설명서의 QR 코드를 모바일로 스캔 합니다.
클릭하여 프로그램을 다운로드한 다음 중지합니다.
(위젯으로 QR코드를 스캔하는 경우 수동으로 전환하여 열어야 합니다.)
프로그램 다운로드에는 중국어로 되어 있는 2번 항목을 선택해 주세요.
(실제 사용자 시를 아래에 한글로 표시 됩니다.)

[IOS app download](#)

[点击下载app\(中国大陆用户\)](#)

[download app \(google play\)](#)




IOS 및 Android 시스템 선택

안심하고 설치 하셔도 됩니다.

케어방법

- ① APP를 다운로드하여 설치합니다.
(특정 단계는 APP 소프트웨어 다운로드 절차를 확인하십시오)
- ② 기기를 모바일 APP와 연결합니다.
(자세한 연결방법은 APP 기능 설명을 확인하십시오)
- ③ 기초적인 세안 후 얼굴 따뜻한 물수건으로 모공을 넓혀거나 블랙헤드 추출용 크림 등을 사용 후 피지를 제거합니다.
- ④ 적절한 흡입 노즐을 사용하여 제품 상단에 설치하고 손바닥이나 팔뚝에 흡착을 시험합니다.
- ⑤ 피부 상태에 따라 적절한 흡입력을 선택합니다.
(Sooth/Normal/STRONG)
- ⑥ 흡입노즐이 피부에 부착되어 있고 틈이 없는지 확인하십시오.
그렇지 않으면 진공 음압이 형성되지 않습니다.
- ⑦ 제품을 사용할 때는 계속 움직여야 하며, 제품을 너무 오랫동안 한 위치에 두지 마시고, 같은 부위에는 3초 이상 사용하지 마세요. 각 작동 시간은 5분을 초과하지 않으며 대기 모드에서 5분 이내에 제품이 작동하지 않으면 자동으로 종료됩니다.
- ⑧ 사용 후 전원 버튼을 눌러 제품의 전원을 끄고, 피부를 얼음팩질 또는 세럼으로 피부를 진정시킬 수 있습니다.
일주일에 1~2회 정도 사용할 것을 추천 드립니다.

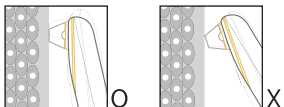

제품소개


◎ 제품 설명

내시경 피지흡입기는 진공(압축)기술을 이용하여 4개의 전용 흡입 노즐로 블랙헤드, 여드름, 피지 등을 효과적으로 제거해주며, 모공을 깨끗하게 청소하여 더욱 매끈한 피부를 유지 할 수 있습니다.
또한 200만 화소의 카메라가 내장 되어 피부를 직관적으로 모니터링 할 수 있어 더욱 신뢰가 가는 제품입니다.



제품기능


- 전원 버튼을 2초간 길게 누르면 렌즈가 커지면서 전원이 켜집니다.
- 전원을 켜 후 버튼을 짧게 눌러 소프트/보통/스트롱/대기 모드 중에서 선택하여 사용하시면 됩니다.
- 배터리가 저전력 일 경우 배터리 표시등이 빨간색으로 켜지고 천천히 깜박입니다.
- 충전 시 빨간색 배터리 표시등이 켜지고, 완전히 충전되면 초록색 표시등이 켜집니다.
- 각 모드는 약 5분간 작동하며, 이후 대기 모드로 전환됩니다.
5분 후 작동되지 않으면 자동으로 종료됩니다.
- 모든 작동 모드에서 전원 버튼을 2초간 길게 누르면 전원이 꺼집니다.

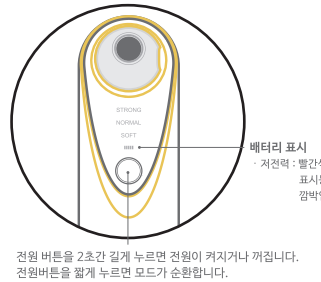

APP 기능 설명

APP를 통해 이 제품의 카메라를 연결하면, 보다 편하게 눈으로 직접 확인 하면서 모공을 청소할 수 있습니다.

- ① 기기의 전원을 켜고 휴대폰에서 WIFI를 설정합니다.
WIFI (JS-LBQ-H****) 에 연결 합니다.
- ② APP를 열고 홈 페이지에 들어갑니다. (장치가 있는 경우) 연결이 되지 않으면 APP에서 즉시 작동 지침을 표시합니다.
- ③ 'Js' 를 클릭하여 카메라에서 전송된 이미지를 확인합니다.
- ④ 사용자 시 얼굴 피부 상태에 따라 위치를 적절하게 조절하여 사용합니다.
- ⑤ '비디오'를 클릭하여 피지흡입기에 의해 전송된 이미지를 저장할 수 있습니다.
- ⑥ '사진 찍기'를 클릭하여 피지흡입기 장치의 카메라가 전송한 이미지를 사진 형식으로 휴대폰에 저장합니다.
- ⑦ 사용 후 바로 백그라운드에서 앱을 닫습니다.

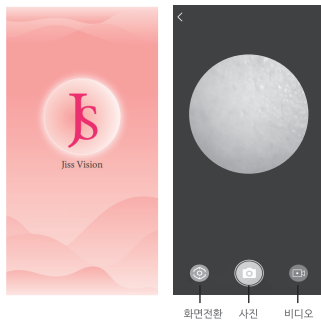

충전 및 표시등

- ① 처음 사용하기 전에 기계를 완전히 충전하십시오.
 - ② DC5V/1A의 어댑터를 사용해 주십시오.
 - ③ 충전 중에는 빨간색 배터리 표시등이 켜집니다.
 - ④ 완전히 충전되면 초록색 배터리 표시등이 켜집니다.
 - ⑤ 저전력이 발생하면 빨간색 배터리 표시등이 깜박입니다.
완전히 충전한 후 사용하십시오.
- ※ 10초 충전 후에도 연결이 시작되지 않은 경우, USB 케이블이 연결되어 있는지, 전원 공급이 정상인지 확인 하십시오.
- ※ USB 케이블은 반드시 동봉된 케이블을 사용해 주십시오.

제품 사양

- 제품 이름 : 내시경 피지흡입기
- 제품 모델 : H02
- 정격 입력 : DC 5V / 1A
- 정격 전력 : 3W
- 배터리 용량 : 850mAh/3.7V
- 제품 크기 : 40 x 47.5 x 163.9 (mm)
- 실행 표준 : GB 476.1-2005

FAQ

Q: 왜 블랙헤드는 잘 나오지 않을까요?

A: 1. 정상적인 경우 모공이 닫혀 있습니다. 제품 사용 전 따뜻한 물수건으로 모공을 확장 시키거나 블랙헤드 추출크림을 사용하면 보다 부드럽고 간단하게 압출할 수 있습니다.
2. 적절한 노즐을 사용하여 피부 상태에 따라 적절한 흡입력을 선택합니다.

Q: 피지 흡입기 사용 후 왜 사용 부위가 빨간색으로 되나요?

A: 진공 부압의 흡입력으로 인해 추출 후 피부가 약간 홍조를 띠게 되는데, 정상이며 1시간 이내에 희미하게 사라집니다. 제품을 사용할 때는 같은 부위에 3초 이상 방치하지 않는 것이 좋습니다.
제품 사용 후 얼음 팩질하거나 세럼팩을 추가로 사용할 수 있습니다.

Q: 적절한 단계를 선택하는 방법은 무엇입니까?

A: 제품을 사용하기 전에 손으로 흡입력을 확인한 후 점차 적정 수준으로 조절하여 주십시오.

Q: 사용하는 동안 왜 아픈가요?

1. 흡입력이 강하지 않은 단계부터 사용하면서 고객에게 맞는 단계를 골라주십시오
2. 더 작은 흡입노즐을 선택하십시오.
3. 제품을 한 부분에 3초 이상 머물지 말고, 계속 움직여서 사용해 주십시오.
4. 각 단계의 사용은 5분을 초과하지 마십시오.

Q: 사용 빈도는 어떻게 되나요?

A: 민감성 피부와 건성 피부는 일주일에 한 번, 지성 피부와 혼합성 피부는 일주일에 두 번 사용해 주십시오.

Q: 완전히 충전된 후에는 얼마나 작동할 수 있습니까?

A: 모바일 연결 시 90분, 모바일 미연결 시 150분 동안 연속으로 사용할 수 있습니다.

Q: 모바일 앱을 연결할 수 없는 이유는 무엇입니까?

- A: 1. 피지흡입기 장치가 켜져 있는지 확인하십시오.
2. 휴대폰의 WIFI를 켜진 후 기기의 WIFI를 연결 해주십시오.

Q: 앱이 왜 갑자기 꺼질까요?

A: 제품의 배터리가 부족할 경우 앱이 꺼질 수 있으니 제품이 완전히 충전되면 다시 시도하십시오.

Q: 기기가 응답하지 않는 이유는 무엇입니까?

A: 기기가 보호 상태로 전환되었을 수 있습니다. 버튼을 8초간 길게 눌러 기기를 다시 시작하십시오.

유해 물질

부품 명	납 (Pb)	수은 (Hg)	카드뮴 (Cd)	중금 크롬 (Cr(VI))	폴리브로마화비페닐 (PBB)	폴리브로디메틸테라페닐 에테르 (PBDE)
플라스틱 부품	○	○	○	○	○	○
PCBA	×	○	○	○	○	○
공기 필터	○	○	○	○	○	○
배터리	○	○	○	○	○	○
USB	○	○	○	○	○	○
열원 재료	○	○	○	○	○	○
포장재료	○	○	○	○	○	○

이 시트는 SJ/T 11364에 따라 작성되었습니다.
A: 모든 물질 유해물질의 함량을 나타냅니다.
부품의 재료가 GB/T 26572에 명시된 한계 미만이면입니다.
X: 하나 이상의 유해 물질 함량을 나타냅니다.
부품의 동종 소재가 GB/T 26572에 명시된 제한 요구사항을 초과합니다.
참고: 위험 및 독성 물질 또는 성분이 포함된 부품은 글로벌 수준의 제약으로 인해 고제가 불가능합니다.

청소 및 유지 관리

- ① 제품이 꺼져 있는지 확인하고 감전되지 않도록 기기를 세척하지 마십시오.
- ② 흡입노즐을 세척할 때 먼저 흡입노즐을 제품에서 제거한 후 따뜻한 물로 노즐을 세척하십시오.
- ③ 본체는 방수 처리가 되어 있지 않아 물 티슈나 젖은 천으로 깨끗하게 닦아주세요. 물로 직접 세척하지 마십시오.
- ④ 제품 카메라 렌즈는 연봉으로 닦아야 하며, 단단한 물체로 렌즈를 만지지 마십시오.
- ⑤ 부식성 용액을 사용하여 닦지 마십시오.
- ⑥ 일반 건조한 환경에 보관하십시오.
- ⑦ 제품을 개인적으로 분해하지 마십시오. 결함이 있거나 제품을 사용할 수 없는 경우에는 사용하지 말고 구매처에 문의하십시오.



설명서에 사용된 그림은 참조용으로만 사용됩니다.
실제 제품을 참고하시기 바랍니다.